


**UK
A**

CE

aidapt[®]

Jar and Bottle Grip Opener

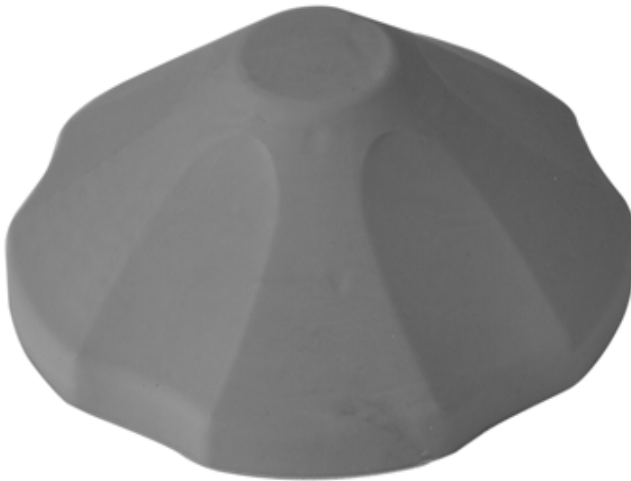

VM992AA

Usage and Maintenance Instructions

INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Jar and Bottle Grip Opener from Aidapt. This product is manufactured from the finest materials available. When used correctly it is designed to give many years of reliable, trouble-free service.

BEFORE USE

- Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.
- Check the product for any visible damage. If you see any damage or suspect a fault, do not use your product, but contact your supplier for support.

INTENDED USE

The Jar and Bottle Grip Opener is constructed from a non-slip, rubber material. It is very flexible and can be used with many sizes and types of bottle lids and caps as well as cupboard doors and taps.

USING YOUR JAR AND BOTTLE GRIP OPENER

Position the dome-shaped bottle opener over the bottle top or lid and twist to open or tighten.

Please note: product may not be effective when wet. Do not subject to temperatures over 50 degrees Celsius.

CLEANING

When your product gets dirty and dusty, simply restore the Non-Slip properties by washing in warm soapy water and allowing it to dry away from direct heat.

REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk
Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk



Ouvre-Bouteilles et Bocaux



VM992AA

Notice d'Utilisation et d'Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté cet ouvre-bouteilles et bouchons chez Aidapt. Celui-ci est fabriqué avec les meilleurs matériaux disponibles. Si vous l'utilisez correctement, il vous rendra service pendant de nombreuses années.

AVANT UTILISATION

Retirez parfaitement l'emballage. Évitez d'utiliser un couteau ou tout instrument coupant qui pourrait endommager la surface du produit.

Vérifiez votre produit pour tout dommage visible. En cas de dommage ou de défaut suspect, veuillez ne pas utiliser votre produit et contactez votre fournisseur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Cet accessoire est fabriqué à partir d'un matériau anti-dérapant. Il est très souple et peut être utilisé avec de nombreux types de bouchons de bouteilles aux dimensions variées.

CONSEILS D'UTILISATION

Positionnez cet accessoire en forme de dôme sur le bouchon de la bouteille ou du flacon et tournez pour ouvrir ou serrer.

Veuillez noter : Cet accessoire n'est pas efficace quand il est mouillé. Ne pas le soumettre à des températures excédant 50 degrés Celsius.

NETTOYAGE

Lorsqu'il est sale et poussiéreux, lavez-le avec de l'eau savonneuse tiède et laissez-le sécher.

ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement l'état de votre produit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations données dans cette notice d'utilisation ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un quelconque contrat ou engagement par Aidapt Bathrooms Limited Aidapt Wales ni ses agents ou filiales et aucune garantie n'est donnée concernant ces informations.

Nous vous remercions de faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)

Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France

Tél: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Dosen- und Flaschenöffner



VM992AA

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb dieses Dosen- und Flaschenöffners von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

VOR GEBRAUCH

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.

Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VERWENDUNGSZWECK

Der Dosen- und Flaschenöffner ist aus einem Anti-Rutsch Material hergestellt. Er ist zudem sehr flexibel und kann zum Öffnen von vielen verschiedenen Arten von Deckeln und Verschlüssen eingesetzt werden.

GEBRAUCH

Platzieren Sie den kuppelförmigen Flaschenöffner über dem Verschluss oder Deckel und drehen Sie ihn zum Öffnen oder Schließen.

Bitte beachten: Der Anti-Rutsch-Effekt dieses Materials funktioniert nicht, wenn es nass ist. Setzen Sie dieses Produkt nicht Temperaturen über 50 Grad Celsius aus.

REINIGUNG

Sollte dieses Produkt schmutzig oder staubig werden und dadurch seine Anti-Rutsch-Eigenschaft verlieren, so können Sie diese Eigenschaft einfach wiederherstellen, indem Sie das Produkt in warmem, seifigem Wasser waschen und es danach wieder trocknen lassen.

NEUVERGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

Im Zweifelsfall bitte nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

Aidapt Germany

Reklamationen & Rücksendungen an: W.H. Service, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve

Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815